

胰島素筆使用方法

預備物品：

打針筆、針咀、酒精棉

注射程序：


1. 洗手
2. 如使用混合胰島素(濁針)，需搖藥水(上下搖勻二十下)(如圖一)
3. 用酒精棉消毒筆式小管底端的橡皮塞，然後安裝針咀
4. 拔開針蓋
5. 試針及消除氣泡：
(A) 新開啟 → 試 2 度
 使用中 → 試 1 度
(B) 針頭向上，按下劑量旋扭直到顯示窗為「0」度，觀察有否藥水滴出
* 如沒有藥水滴出，重做第 5 點；如重做仍沒有藥水滴出，可嘗試更換針頭
6. 按醫生指示調較藥物劑量
7. 消毒注射部位(見圖二) 及有需要時夾起皮膚後注射(如圖三)
8. 注射完畢，最少等 5 秒才放鬆皮膚然後拔針
9. 可用棉花輕按針口及檢查注射部位
10. 套回大針蓋，扭出針咀，棄置於適當器皿

儲存方法：

已開啟之胰島素筆不需放在雪櫃，應放於陰涼地方，有效期為 28 天



(圖一) 搖動藥水方法

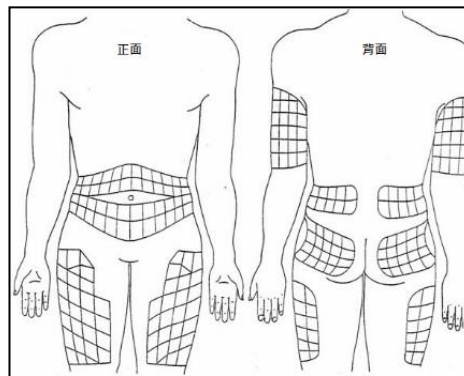

(圖二) 胰島素注射部位



(圖三) 注射方法